


Sidemarkar CT /MRT

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer så ska någon typ av markering införas i bla. datortomografens gantry för att i efterhand kunna särskilja höger och vänster sida på bilderna.

Ett enkelt märksystem för CT/MR har därför tagits fram av Michael Söderman MD, PhD. Neuro.NKS Solna/Stockholm.

- Enkelt och säkert
- Finns för både MR och CT
- Minskar risken för felmärkning
- Perfekt för extremiteter som händer och fötter
- Hygienisk

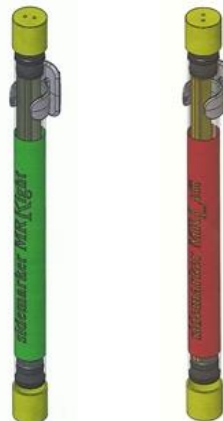

Märket syns bra på det datortomografiska snittet med en fönsterbredd på 80HU och en fönsternivå på 43HU. Dess längd är ca. 200mm och R-ets stapel är ca. 13mm. För att minska risken för artefakter är R-et resp. L-et omgivet av ett tunt plaströr.

Märkröret för MR är fyllt med olja och R-et resp. L-et syns med negativ kontrast då det blir signal från oljan.

Syns både på T1 och T2-viktade bilder.

